




DELUXE MASSAGE CHAIR

Damico Vento 3D

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

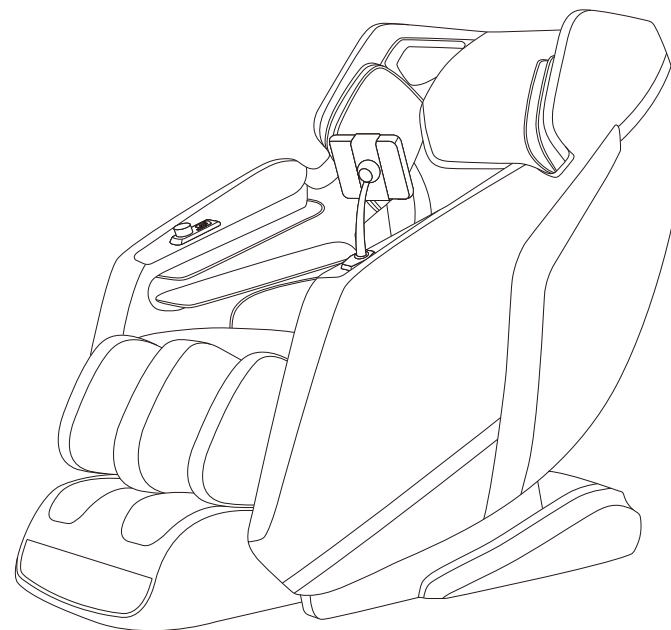

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

Prajeme vám veľa relaxu, pohody a zdravia.

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hociakých ďalších upozornení. Vzťahuje sa na prevedenie produktu.

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hociakých ďalších upozornení. Vzťahuje sa na prevedenie produktu.

Obsah

- 1-6 Bezpečnosť
- 7-12 Komponenty
- 8-11 Ovládanie
- 12 Automatický režim
- 13-17 Príprava pred použitím
- 13 Pohyb a umiestnenie kresla
- 14 Inštalácia častí na nohy
- 15-16 Inštalácia vankúšov, ovládania a napájania
- 17 Čistenie a údržba
- 18 Riešenie problémov
- 19 Špecifikácia

POZOR!!! - ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE KRESLO DAMICO VENTO

Pri nastupovaní a vystupovaní do a z kresla si dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo, čo zapína kreslo a nepoškodili dotykové ovládanie. Nikdy nenastupujte a nevystupujte z kresla ktoré je v pohybe a ani vtedy, keď kreslo nie je v základnej sedacej polohe s nohami na zemi!!!

Po nastúpení do kresla a zapnutí prebieha sken postavy, dôkladne sa oprite hlavou aj chrbtom k opierke, inak Vás kreslo zle zameria.

Kreslo môže používať iba 1 osoba
Zákaz používania deťom do 12 rokov bez dozoru.
V prítomnosti detí kreslo vypnite hlavným vypínačom.

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .



- Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
- Použite bezpečný uzemnený prívod elektrického napätia
- Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
- Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
- Iné využitie ako je uvedené v tomto manuále je zakázané.
- Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textília alebo ekokoža poškodená.
- Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrívaním.
- Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
- Zamedzte vhadeniu alebo vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla.
- Pri používaní produktu nikdy nespíte a ani nezaspávajte.
- Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
- Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle.
- Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniknutiu zranení.
- **Je zakázané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.**
- **Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostre časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.**

2. Prostredie na používanie.

- Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni a podobne.
- Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
- Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod.
- Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

3. Ľudia, ktorí nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom , že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrým telom je vstup na produkt zakázaný.

Bezpečnosť a údržba

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.
- Nezapájajte produkt mokrymi rukami.
- Voda ani iná tekutina sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické káble a vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprirodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátané detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti do 15r by mali byť vždy pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhlí nebezpečiu.

5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhňte sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnete sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistíte suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvíhnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**


6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Bezpečnostné upozornenia


⚠ Pozor

Pri pohybe kresla a časti na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

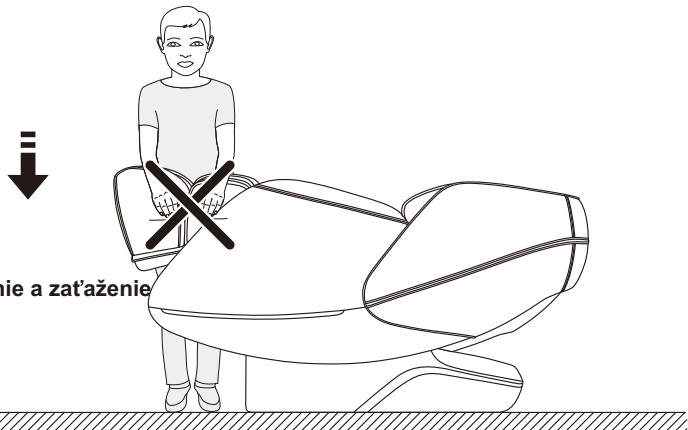

⚠ Pozor

Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené a kreslo je v základnej polohe, nikdy nevstupujte a nevystupujte z kresla ak je v naklonenej polohe, zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla.

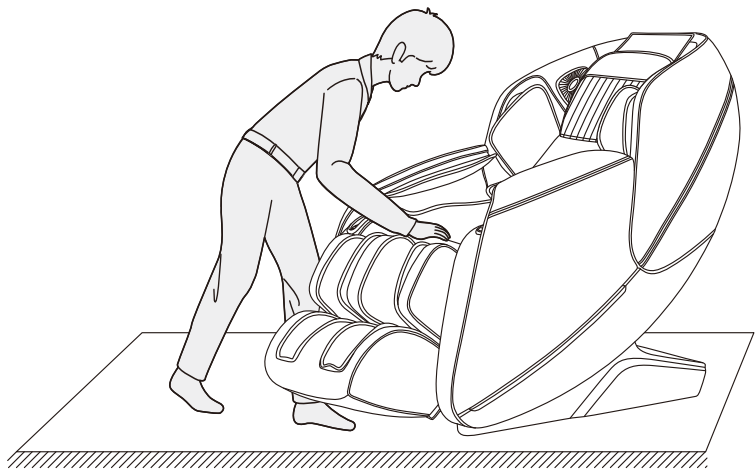


04

Bezpečnostné upozornenia


⚠ Pozor

Počas pohotovostného aj zapnutého režimu nevyťahujte ovládací alebo napájací kábel, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo úrazu elektrickým prúdom. Odporúčame odpojiť kábel ovládača a napájací kábel a odložiť vždy po použití kresla, chráňte ich pred deťmi!

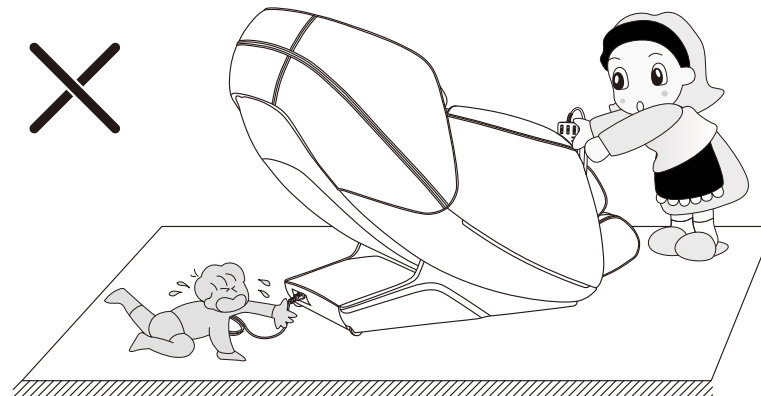

⚠ Pozor



Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

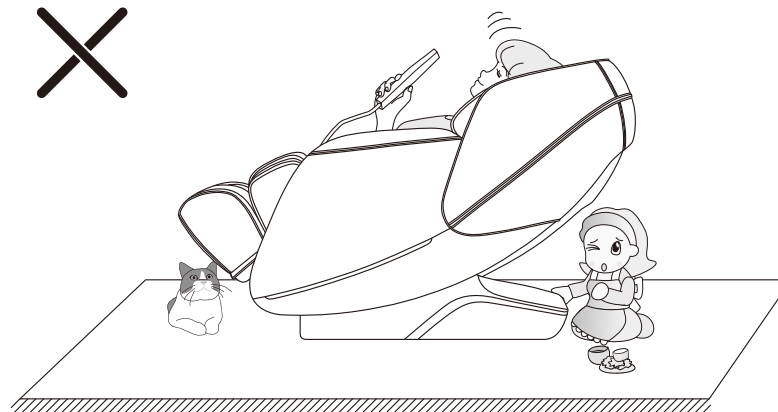

05

Komponenty


Vonkajšie časti

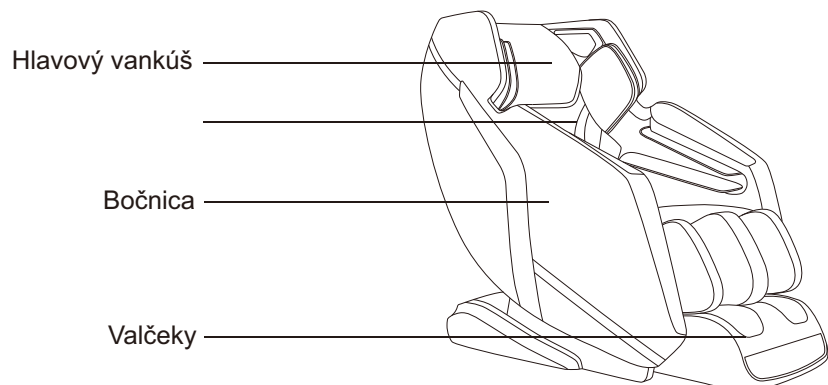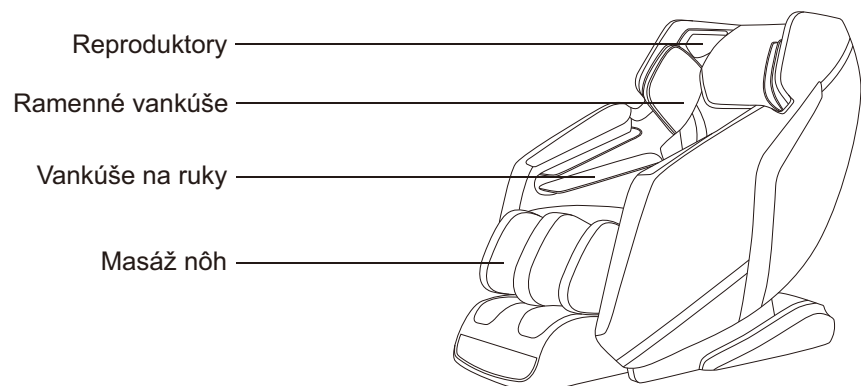

Komponenty

Ovládanie

(Môže sa odlišovať podľa aktuálnej modelovej rady.)

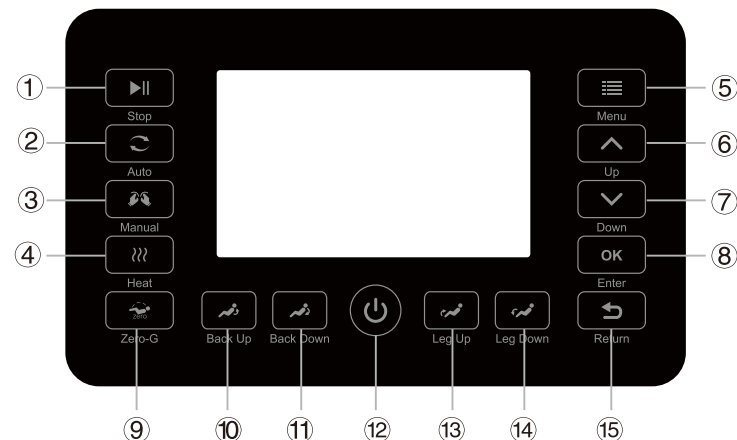












① Zapnutie/pauza	② Auto programy	③ Manuálny režim
④ Vyhrievanie	⑤ Menu	⑥ Pohyb hore
⑦ Pohyb dole	⑧ Potvrdenie	⑨ Bezťažová poloha
⑩ Chrbát hore	⑪ Chrbát dole	⑫ Vypínač - Power
⑬ Nohy hore	⑭ Nohy dole	⑮ Späť v menu

⚠ UPOZORNENIE

- Nesadajte si na ovládanie, ani ho nezaťažujte ťažkými predmetmi.
- Zamedzte pádom a nárazom diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte a nestláčajte ovládanie veľkou nadmernou silou.
- Chráňte ovládanie pred vodou a inými tekutinami
- Nepoužívajte ovládanie s mokrymi a vlhkými rukami.
- Nepoužívajte na stlačenie ovládania ostré a tvrdé predmety.


Komponenty









Funkcie ovládania

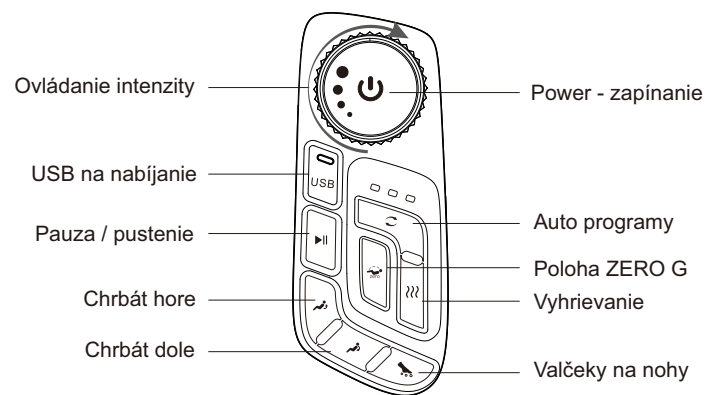Funkcia	Ikona	Popis
Power		Zapnutie / vypnutie kresla
Stop		Tlačidlo pauza pozastaví všetky masážne funkcie, po ďalšom stlačení pokračuje masážny program ďalej.
Auto		Tlačidlo na voľbu výberu medzi rôznymi AUTO programami. Stláčaním si prepínajte až na požadované číslo programu.
Manual		Tlačidlo na voľbu výberu manuálneho režimu. Môžete si zvoliť požadovanú masážnu techniku a pozíciu masážnych hlavíc
Menu		Vstup do ovládacieho menu kresla.
Up/Down/ Enter		Posunom šípkami v menu smerom hore, alebo dole vyberte požadovanú funkciu a potvrdte voľbu tlačidlom Enter. Pri skenovaní postavy a v manuálnom režime slúžia šípky na posuv masážnych hlavíc a výber úseku kde majú hlavice masírovať.
Return		Tlačidlo pre návrat v menu kresla.
Heat		Zapnutie / vypnutie vyhrievania (nábeh cca 2 min.)
Zero-G		Po stlačení sa dostanete do polohy Zero G. Displej ukazuje ikonku Zero G, ak ikona nesvieti, funkcia je vypnutá.
Back Up / Back Down		Manuálne upravenie sklonu chrbtovej opierky.
Leg Up / Leg Down		Manuálne upravenie sklonu časti na nohy.

Komponenty

Funkcie ovládania

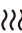


Function	Button	Instruction
Power		Stlačte pre zapnutie / vypnutie kresla
Rotation		Zmena intenzity masážnych hlavíc. Otočením v smere hodinových ručičiek pridávate, naopak uberáte. Intenzita 1-5.
Stop		Tlačidlo pauza pozastaví všetky masážne funkcie, po ďalšom stlačení pokračuje masážny program ďalej.
Auto		Tlačidlo na voľbu výberu medzi rôznymi AUTO programami. Stláčaním si prepínajte až na požadované číslo programu.
Heat		Zapnutie / vypnutie vyhrievania (nábeh cca 2 min.)
Zero-G		Po stlačení meníte úroveň polohy Zero G.
Back Up / Back Down		Manuálne upravenie sklonu chrbtovej opierky.
Roller		Zapnutie / vypnutie valčekov na chodidlá.

Komponenty

Ovládanie

(Môže sa odlišovať podľa aktuálnej modelovej rady.)

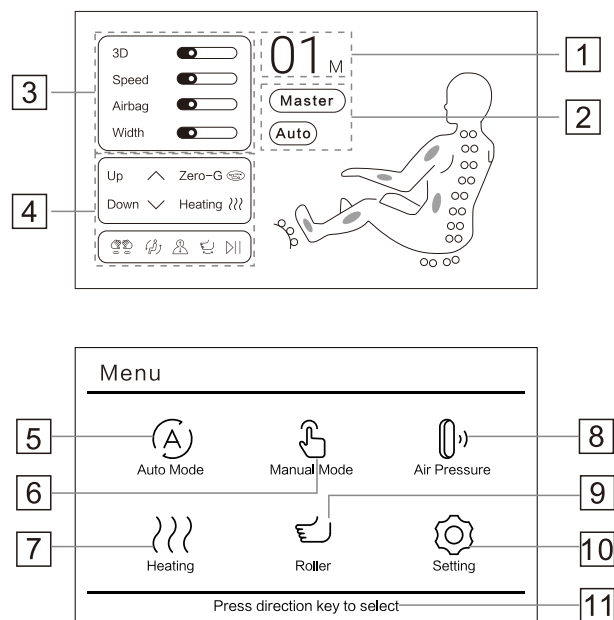

- 1** Čas masáže
- 2** Režim / program
- 3** Intenzity počas masáže
- 4** Masážne techniky, zobrazenie funkcií
- 5** Auto programy - rôzne možnosti masáže - výber programov
- 6** Manuálny režim - rôzne techniky, cielenie a možnosti masáže
- 7** ZAP / VYP vyhrievania na chrbát a chodidlá. Nábeh cca 2 min.
- 8** Vzduchové vankúše - zapínanie rôznych okruhov, regulácia intenzity
- 9** Regulácia intenzity - rýchlosti valčekov na chodidlá, možnosť VYP / ZAP
- 10** Nastavenie dĺžky masáže, výber jazyka v menu.
- 11** Inštrukcia: Zvoľte pomocou šípok položku menu, potvrdte s ENTER

Components


Auto Mode

Program	Popis	Intenzita
01-Master	Predvolený program, celotelová masáž, intenzita hlavic a vankúšov je vyššia.	Stredná
02-Relaxing	Relaxačný program, celotelová masáž, intenzita hlavic a vankúšov je mierna.	Stredná
03-Sport Care	Celotelová masáž, špeciálne navrhnutá pre športovcov.	Stredná
04-Soft	Jemná masáž, vhodná pre starších a ľudí s intenzívnejšími bolesťami. Hlavice aj vankúše fungujú v nízkej intenzite na postupnú a príjemnú úľavu.	Nízka
05-Stretch	Celotelová masáž so strečingovým režimom na nohy a chrbát.	Vysoká
06-Sleep	Celotelová masáž spojená s húpavými pohybmi kresla, nízka intenzita masážnych hlavic.	Nízka
07-SPA	Chrbtové masážne hlavice nepracujú, pre úľavu a relax slúžia vzduchové vankúše a valčeky na nohy.	Stredná
08-Refreshing	Celotelová masáž na povzbudenie tela, intenzita hlavic a vankúšov je vyššia.	Stredná
09-Spine Care	Celotelová masáž, stredná intenzita vankúšov, zameranie na krk a ramená, pomáha uľaviť od bolesti pri sedavom zamestnaní.	Stredná
10-Waist&Back	Čiastočná masáž zameraná na spodnú časť chrbta, pomáha uvoľniť bolesť hlavne v týchto partiách tela.	Stredná
11-Neck&Shoulder	Čiastočná masáž určená na krk a stuhnuté ramená, hlavice sú zamerané hlavne na tieto partie tela.	Vysoká
12-Slim	Celotelová masáž, nápomocná pre štíhlejšie boky a pás.	Nízka

Príprava pred použitím


Presúvanie kresla:

- vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel
- pomocou min. 2 osôb nakloňte kreslo na zadné kolieska (ako na obr.)
- pri posúvaní chráňte podlahu aby sa nepoškodila

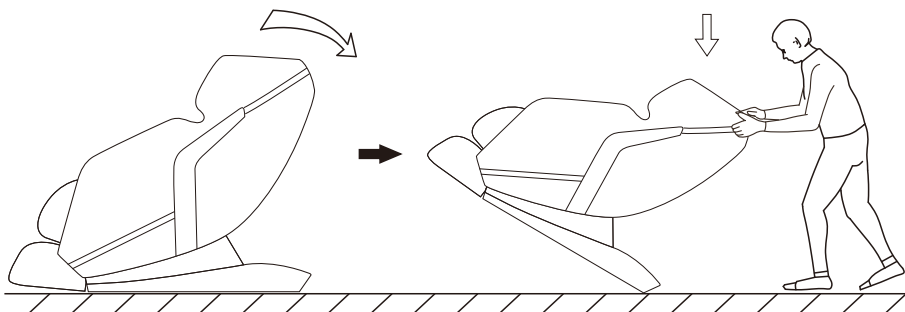

Umiestnenie kresla:



Uistite sa prosím, že minimálny priestor za kreslom je 5 cm (odporúčame 10cm) a pred kreslom je voľný priestor minimálne 35 cm kvôli vysúvaniu časti na nohy.

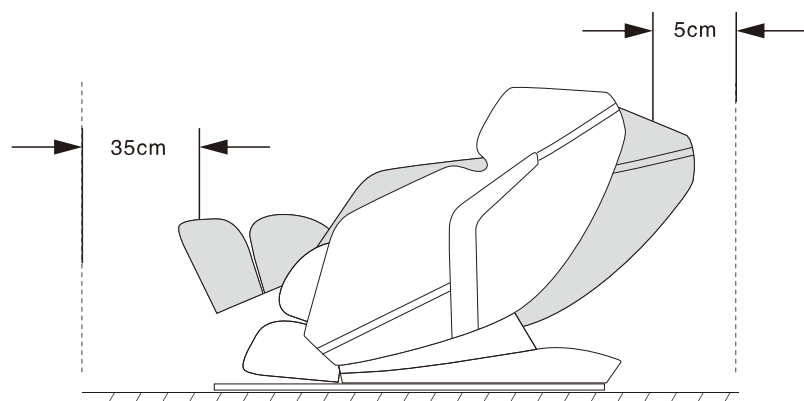



Príprava pred použitím

Inštalácia časti na nohy:



- ako je znázornené na obrázku zapojte hadičku (1) a konektor (2) do kresla

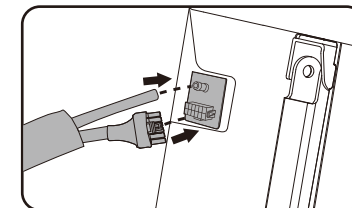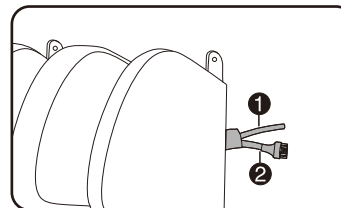

- nasuňte otvory v časti na nohy (3) na pevné čapy na kresle (4)

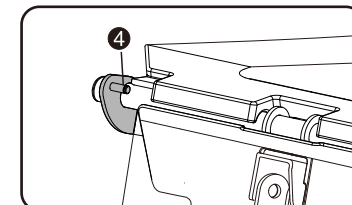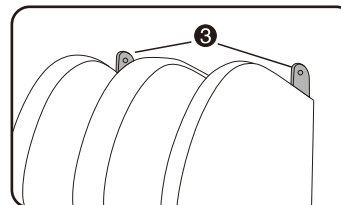

- zasunúte priložené poistné závlačky na každý čap pre uchytenie časti nôh

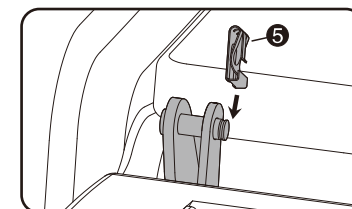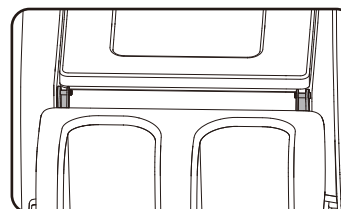


Príprava pred použitím

Inštalácia chrbtovej opierky a vankúša:

- spojte chrbtovú opierku so zipsom na vrchu kresla
- spojte vankúš pomocou suchého zipsu s opierkou




- spojte chrbtovú opierku pomocou zipsov po oboch stranách kresla

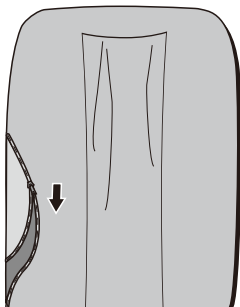

Inštalácia držiaku ovládania:


- napasujte podľa otvorov a priskrutkujte
- zasunúť dole kryt skrutiek

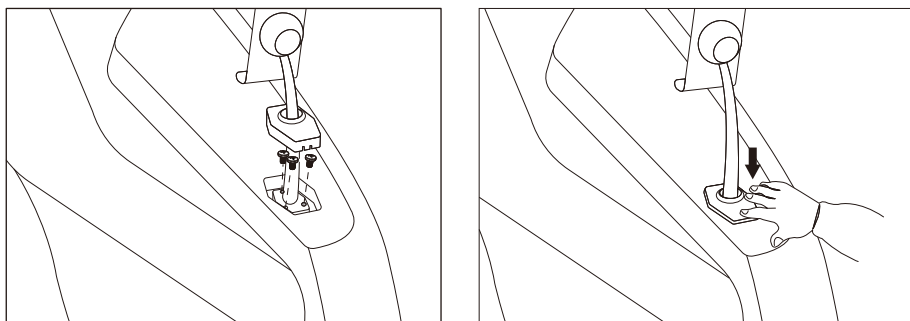

Príprava pred použitím


Pripojenie diaľkového ovládania:

- spojte kábel od ovládania s konektormi v mieste sedenia

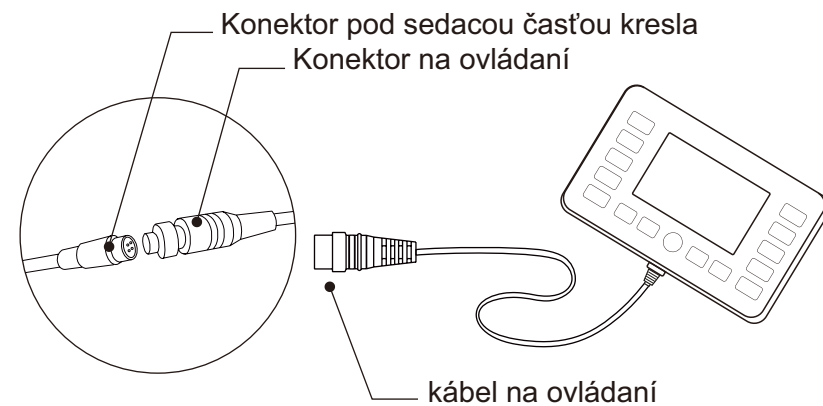

Napájací kábel:

- zapojte napájací kábel do konektoru na kresle, zapnite napájanie.

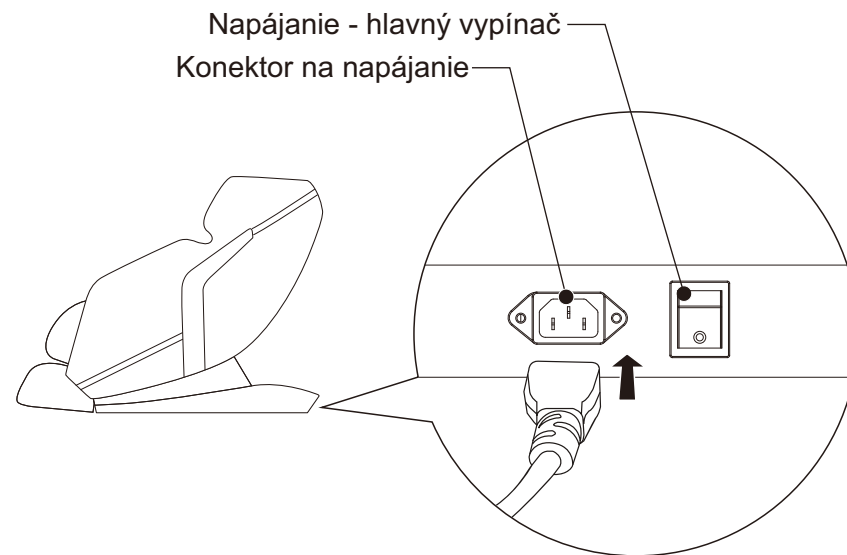

Čistenie a údržba


Spôsob čistenia

Prosím dodržujte nasledovné inštrukcie pri čistení povrchov na kresle

- uistite sa, že zariadenie je vypnuté a odpojené od napájacej siete
- na čistenie použite jemnú mikrovláknovú útierku namočenú vo vlažnej vode
- mierne vlhkou útierkou očistite povrchy, z útierky nesmie tiecť a kvapkať voda
- povrch môžete následne vysušiť jemnou suchou útierkou

POZOR!


- nepoužívajte alkoholové, benzínové ani iné chemické čistiace prostriedky
- nesušte povrch fénom ani iným teplovzdušným zariadením
- nežehlite žiadny povrch kresla
- pri údržbe vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete
- použite ochranný obal proti prachu ak kreslo dlhodobo nevyužívate
- dávajte pozor na riflovinu a farebné oblečenie, ktoré môže zanechať zafarbenie na povrchu kresla, vyvarujte sa takémuto oblečeniu
- pri nadmernom znečistení utrite produkt jemnou hubkou namočenou v slabom saponáte, najskôr vyskúšajte na malom kúsku na menej viditeľnom mieste.
- Voda na čistenie nesmie mať viac ako 40 stupňov

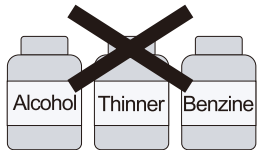

Nepoužívajte čistiace prostriedky.



Teplota vody nesmie prekročiť 40 stupňov.

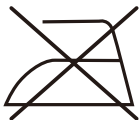

Nežehlite žiadnu časť ani povrch.

Riešenie problémov



Pozrite si a skontrolujte zoznam možných príčin pri riešení problémov

Ak sa vyskytuje a pretrváva neprirodzené správanie sa kresla, prestaňte zariadenie používať aby ste zamedzili ďalšiemu poškodeniu. Odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte svojho predajcu.

Problém	Možný dôvod / riešenie	
Masážne hlavice idú hore a ostanú stáť.	Po ukončení automatického masážneho programu sa hlavice presunú do najvyššej polohy aby neprekážali po masáži.	Bežný prevádzkový zvuk, nejedná sa o vadu
Hluk počas masáže	<ul style="list-style-type: none">- zvuk poklepávania pri masáži- zvuk trenia masážnych hlavíc o textilné časti- zvuk pohybu masážnych hlavíc pri pohybe- zvuk počas nafukovania vzduchových vankúšov- zvuk počas práce vzduchovej pumpy- zvuk počas vyfukovania vzduchových vankúšov- zvuk počas polohovania masážneho kresla	
Masážne hlavice zostanú stáť počas masáže.	<ul style="list-style-type: none">- sila pôsobiaca na hlavice je príliš vysoká, spôsobené nadmernou záťažou, hlavice prerušia masáž.- pri pohybe hlavíc mierne nadvihnite telo, alebo zmeňte polohu kresla viac do sedacej polohy. (hlavne pri užívateľoch s hmotnosťou nad 100kg dávajte pozor pri používaní, prednostne používajte kreslo v polohe po sediačky pre menšiu záťaž)	Ak po prekontrolovaní všetkých možných dôvodov kreslo stále nepracuje správne, prestaňte ho okamžite používať.
Po stlačení vypínača na masážnom kresle nezačne pracovať, alebo sa ani nezapne..	<ul style="list-style-type: none">- Prosím skontrolujte nasledovné:<ol style="list-style-type: none">1. Je správne pripojený napájací kábel?2. Je zadný hlavný vypínač zapnutý - poloha ON?	
Napájací kábel, alebo napájací konektor sa prehrieva	<ul style="list-style-type: none">- KRESLO IHNEĎ PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ!	
	<ul style="list-style-type: none">- Kontaktujte svojho dodávateľa a popíšte mu závalu	
	<ul style="list-style-type: none">- Nerozoberajte a neopravujte kreslo bez predošlej komunikácie s predajcom, ktorý určí ďalší postup.	

Špecifikácia

Model	Damico Vento 3D
Menovité napätie	100-240V~
Menovitá frekvencia	50-60Hz
Menovitý príkon	170W
Rozmer horná poloha	1524mm x 771mm x 1130mm(L x W x H)
Rozmer dolná poloha	1616mm x 771mm x 953mm(L x W x H)

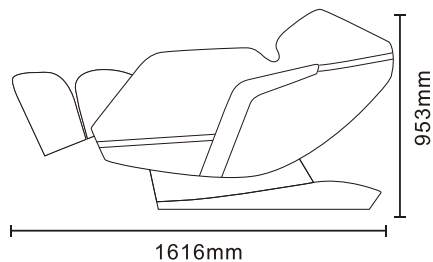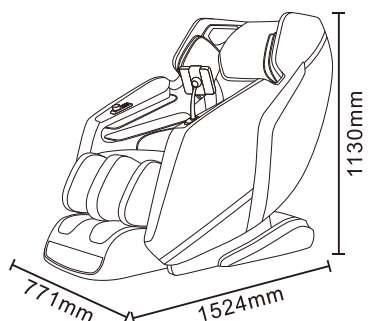

damico

Dovozca pre SR a ČR:
Damico s.r.o.
Zavarská 11G
91702 Trnava

www.damico.sk www.masaznekresla.com